

Mało inwazyjne rozwiązanie


+ Prosta gwintowana szyjka

- Zoptymalizowane zakotwienie
- Stworzony z myślą o zachowaniu kości przy szyjce implantu




+ Progresywny asymetryczny gwint

- Samogwintowanie
- Kształt gwintów zaprojektowany w celu stopniowego zbierania kości podczas wprowadzania implantu

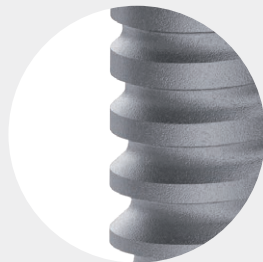

+ Cylindryczno-konikalny kształt

- Implant z kontrolowanym torem wprowadzania
- Atraumatyczny wierzchołek

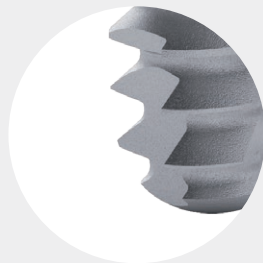

INTELLIGENTNE OPAKOWANIE

- Kolor pomarańczowy dedykowany Axiom® 2.8
- Intuicyjne opakowanie otwierane za pomocą 1 ręki



CAMPUS



Ośrodek szkoleniowy

- 1 sala zabiegowa, 1 laboratorium protetyczne
- 800 przeszkolonych kursantów w ciągu roku
- Konferencje, zabiegi live, warsztaty
- Położenie u stóp Masywu Mont Blanc, pomiędzy Genewą, a Chamonix
- Webinary dostępne na platformie Campus Anthogyr

 **ImplantyPolska®**

Vivamedia Sp. z o.o.
Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk
tel. 58 358 85 06
info@ImplantyPolska.pl
www.ImplantyPolska.pl

C207_GB - 2020-11

Foto : Anthogyr, Getty images, Godefroy de Maupeou.
Wszystkie prawa zastrzeżone - Produkty mogą się różnić od załączonych zdjęć.

www.anthogyr.com


Anthogyr
A Straumann Group Brand

axiom® 2.8



Odpowiedź
na wąskie
przestrzenie
mezjodystalne

 **ImplantyPolska®**

Anthogyr
A Straumann Group Brand

Axiom 2.8 to bardzo wąski dwuczęściowy implant, który doskonale sprawdza się w strefie estetycznej, w przednich rejonach jamy ustnej, zgodnie z kanonami nowoczesnej implantologii. 10 lat doświadczeń klinicznych potwierdza jego niezawodność przy podejmowaniu implantologicznych wyzwań w największych przestrzeniach mezjodystalnych.

KONIKALNE POŁĄCZENIE


- Szczelne, mocne i zwężane połączenie typu stożek Morse'a o nachyleniu 3°
- Brak mikroprzestrzeni

NIEZWYKLE WĄSKI DWUCZĘŚCIOWY IMPLANT

- Optymalne zarządzanie planem leczenia wraz z tkankami miękkimi
- Zachowanie średnicy 2.8 mm nawet przy komponentach protetycznych

3° zwężany stożek Morse'a


3 pozycje łącznika

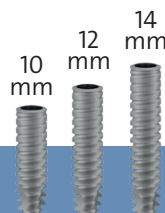

Implant o bardzo małej średnicy do pojedynczych odbudów w wąskich przestrzeniach mezjodystalnych w rejonie siekaczy.

DEDYKOWANA KASETA CHIRURGICZNA I PROTETYCZNA

- Czytelność
- Ergonomia
- Intuicyjny protokół

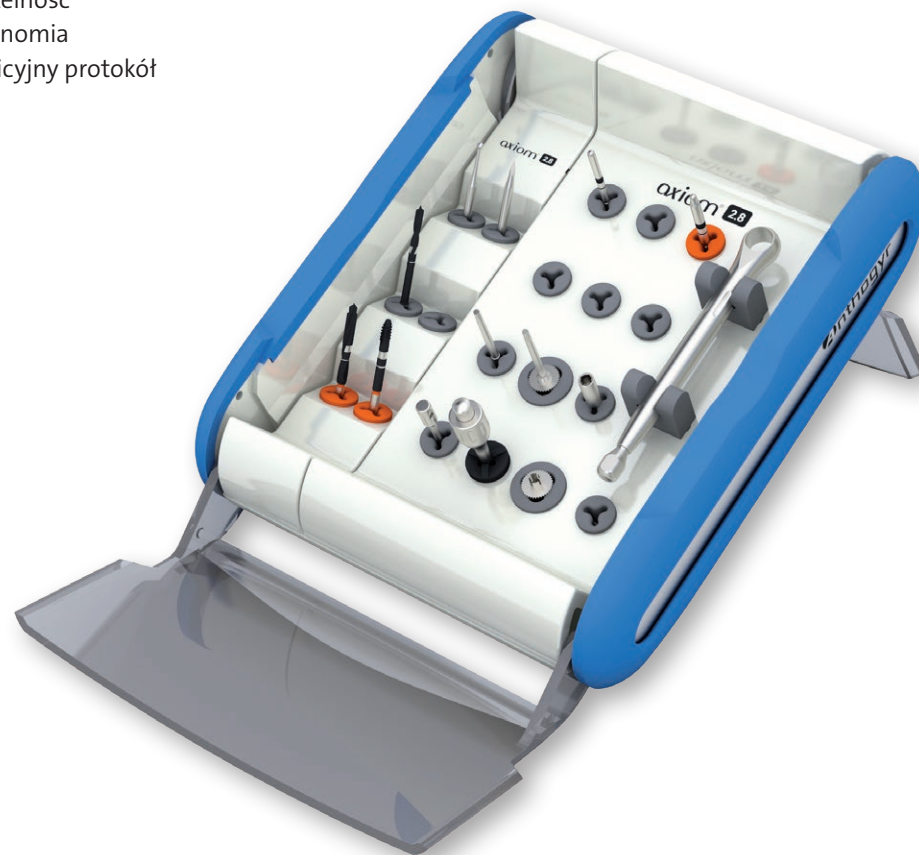

BEZPIECZNA PROCEDURA


- Doskonałe urządzenie Safe lock®
- pełna kontrola
 - precyzyjne, regularne uderzenia
 - bezpośredni napęd z mikromotora

UNIKALNY!



WĄSKIE DEDYKOWANE ŁĄCZNIKI

+ 4 stopnie nachylenia:
0°, 7°, 15°, 23°

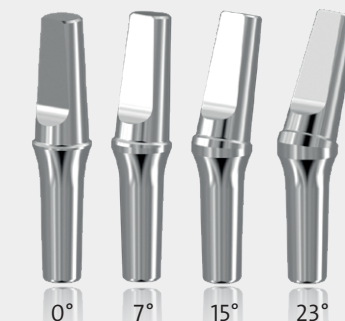

+ 4 wysokości poddąśłowe:
1.0, 2.5, 4.0, 5.5 mm



+ 1 lub 2-etapowa chirurgia



+ łączniki tymczasowe z PEEK dla przygotowania tkanek miękkich

+ Stały profil wyłaniania od zaślepki gojącej aż po ostateczny łącznik

Brak nadmiernego nacisku na tkankę miękką

